

Mesas Anti-vibratórias

Desenvolvidas para o uso em balanças analíticas ou equipamentos que necessitem de apoio e estabilização. Amortece com eficiência as vibrações provenientes do ambiente, assim como choques causados pelo usuário.



Bioscale

IONVIB

Mesa Anti-vibratória


Bioscale

FORMATOS:


Modelo	Medida*
IONVIB30	30 x 30 x 3cm
IONVIB40	40 x 40 x 3cm
IONVIB50	50 x 40 x 3cm
IONVIB60	60 x 40 x 3cm

*Consulte-nos para medidas personalizadas.

- Plataforma com altura e nível regulável;
- Dispositivo de amortecimento regulável;
- Fixador do coxim.

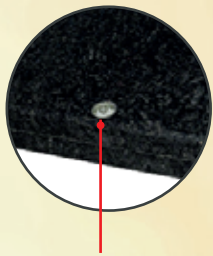

Bolha de nível

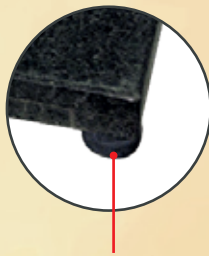

Coxins reguláveis de borracha de alta resistência



Confeccionada em granito polido e nivelado

Consulte disponibilidade de cores.

IONVIB-MDF

Mesa Anti-vibratória em MDF Naval


Confeccionada em MDF naval e pintura automotiva do tipo laca. Possui um sistema de amortecimento duplo (coxins na base estabilizadora e pés de borracha) para facilitar seu nivelamento em qualquer bancada ou mesa de trabalho.



Pés fixos e coxins de borracha de alta resistência

CARACTERÍSTICAS:

Dimensões Externas:	520 x 460 x 85mm
Dimensão da base estabilizadora:	400 x 350mm
Peso:	16kg

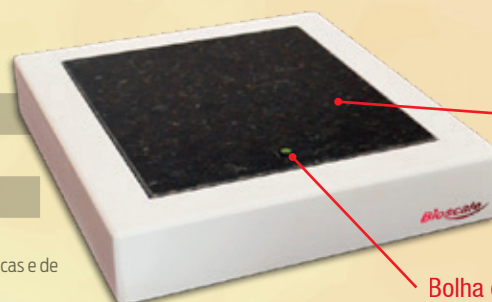

Confeccionada em granito polido e nivelado

Bolha de nível

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações técnicas e de layout alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.